

# Produktübersicht Wundversorgung



# Unser Wertever-sprechen in der Wundversorgung

Patienten mit akuten und chronischen Wunden leiden häufig unter starker Unsicherheit, Schmerzen, Infektionen oder sind in ihrer Mobilität im Alltag eingeschränkt. Umso wichtiger ist es, dass die Wundheilung schnell voranschreitet und jeden Tag zu einer verbesserten Lebensqualität beiträgt.

Fachkräfte kämpfen jeden Tag gegen schwierige Umstände und Zeitdruck, damit das Wohl und die Bedürfnisse der Patienten immer im Vordergrund stehen. Viel Engagement und fundiertes Fachwissen werden von den Fachkräften eingesetzt, um die beste Versorgung für ihre Patienten zu gewährleisten.

Hochwertige Produkte und professionelle Beratung sollen Anwendern und Fachkräften dabei helfen, den Alltag besser und einfacher zu gestalten. Das Ziel von Coloplast ist es, jeden Tag dazu beizutragen, alle Beteiligten auf ihrem Weg zu weniger Tagen mit Wunden zu unterstützen.

**Weniger Tage mit Wunden** – das hat für jeden eine individuelle Bedeutung und dennoch haben alle Beteiligten ein gemeinsames Ziel vor Augen: Jeder strebt die bestmögliche Patientenversorgung an!

Jeder ist Teil des wichtigen Prozesses, die Wundheilung mit fundiertem Fachwissen und moderner Wundversorgung jeden Tag aufs Neue voranzubringen.

**Weniger Tage mit Wunden.**

# Inhaltsverzeichnis

6 | Das Wund-Dreieck

7 | Der Coloplast Wundberg

8 | Schaumverbände  
mit 3DFit Technologie

Biatain® – Hafteigenschaften

Biatain®

Biatain® Silicone

Biatain® Silicone Non-Border

Biatain® Silicone Lite

18 | Schaumverbände  
mit Silber

Biatain® Ag

Biatain® Silicone Ag

22 | Schaumverbände  
mit Ibuprofen

Biatain® Ibu

24 | Hydrokolloide

Comfeel® Plus

Comfeel® Plus Transparent

28 | Superabsorber

Biatain® Super

30 | Alginate/  
Alginate mit Silber

Biatain® Alginate

Biatain® Alginate Ag

34 | Hautfaltenversorgung

InterDry®

36 | Hydrogel/ Hautpflege/  
Hautschutz

Purilon®


Atrac-Tain®

38 | Bestellinformationen

# Das Wund-Dreieck

Coloplast hat weltweit viele Fachkräfte danach befragt, welche Faktoren neben den ganzheitlichen Aspekten der Wundursache und den Patientenbedürfnissen bei der lokalen Wundbeurteilung am wichtigsten sind. Die Antwort war eindeutig: Wundgrund, Wundrand und Wundumgebung. Denn alle drei Punkte tragen entscheidend zur Wundheilung bei.

*Das Coloplast Wund-Dreieck – ein intuitives Konzept zur einfachen Wundbeurteilung.*

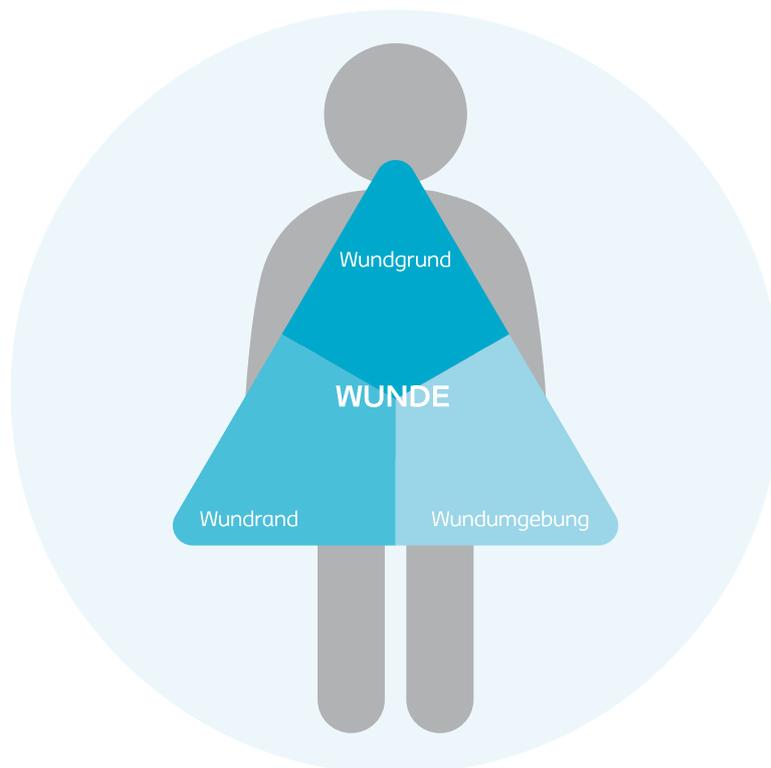

## Wundgrund

Klinisch relevantes Ziel im Wundgrund ist die Abwesenheit von Infektion, ein optimal feuchtes Wundmilieu und die Bildung von Granulationsgewebe. Der Wundberg zeigt je nach Wundstadium phasengerechte Handlungsoptionen auf.


## Wundrand

Der Wundrand sollte vor Störfaktoren, wie z. B. Mazeration und Nekrosen, geschützt werden. Biatain® Schaumverbände schützen den Wundrand durch eine exzellente Absorption und ihre Wölbung zum Wundgrund.

## Wundumgebung

Bei der wundumgebenden Haut wird eine gesunde, von Mazeration und Irritation freie Haut angestrebt. Auch trockene Haut und Hyperkeratosen sollten erfasst und behandelt werden. Ein wichtiger Faktor zum Schutz der wundumgebenden Haut ist die Auswahl eines Verbands mit geeigneter Haftung. Die Biatain® Schaumverbände bieten daher für jeden Hauttyp geeignete Haftarten.

# Der Coloplast Wundberg

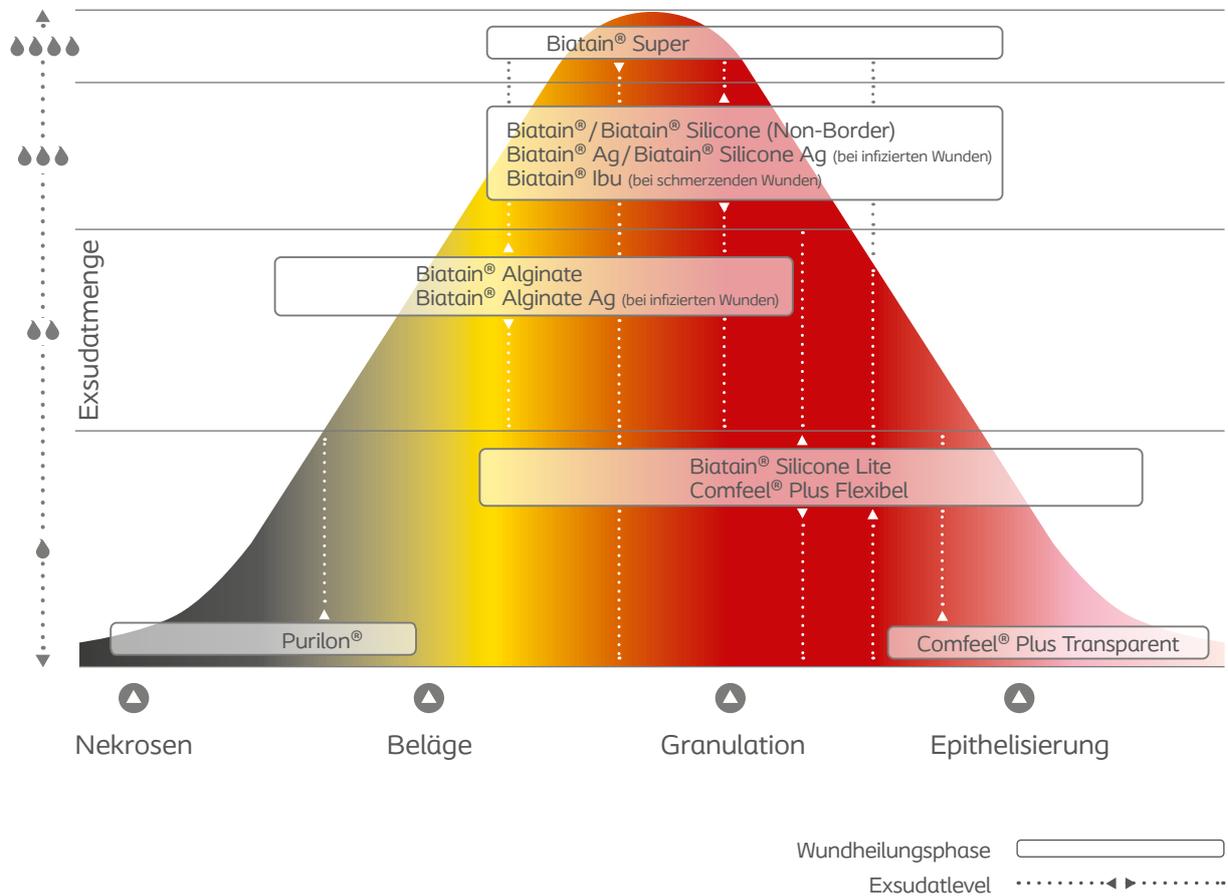

Gemäß den Eckpunkten des Wund-Dreiecks sind die Beurteilung des Wundgrundes sowie die daraus abgeleiteten Behandlungsoptionen wichtige Bestandteile des lokalen Wundmanagements. Bei der Verbandauswahl sollten sowohl die Menge des austretenden Exsudates als auch die Wundheilungsphase berücksichtigt werden. Zusätzlich sollten bei hoher bakterieller Belastung und auftretendem Wundschmerz entsprechende topische und/oder systemische Therapien eingeleitet werden. Der Coloplast-Wundberg bietet eine Orientierungshilfe zu den Einsatzgebieten der einzelnen Verbände.

## EXSUDATMENGE

- leicht
- leicht – mittel
- leicht – stark
- mittel – stark
- leicht – sehr stark

## EIGENSCHAFTEN

- Antimikrobiell
- Zuschneidbar
- Wasserfest
- Fixierung nötig
- Sekundärverband nötig




## **Biatain® Schaumverbände mit einzigartiger 3DFit Technologie**

Die Wölbung macht den Unterschied.

Durch die 3DFit Technologie wölben sich Biatain® Schaumverbände zum Wundgrund, stellen dort einen direkten Kontakt her, verhindern eine Exsudatansammlung und sorgen so für ein optimales Wundheilungsmilieu.

**Wölbung zum  
Wundgrund**

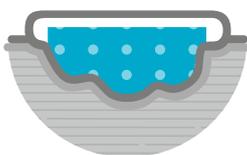

**Vertikale  
Absorption**



**Hohes  
Rückhaltevermögen**





**Biatain® Silicone Schaumverband**

- › für alle Hauttypen
- › auch für brüchige Alters- und vorgeschädigte Umgebungshaut
- › sicherer Halt dank perforiertem Silikon-Distanzgitter über der gesamten Verbandfläche
- › schmerzarter Verbandwechsel



**Biatain® Silicone Non-Border Schaumverband**

- › auch für Wunden mit brüchiger, fragiler wundumgebender Haut
- › hautfreundlich und sanft haftend
- › wie eine 3. Hand beim Verbandwechsel



**Biatain® Schaumverband selbst-haftend**

- › für die Behandlung von Wunden mit intakter wundumgebender Haut
- › sicheres Fixieren dank Hafttrand auf Hydrokolloidbasis
- › kein ungewolltes Abrollen
- › bakterien- und wasserabweisender Topfilm



**Biatain® Schaumverband nicht-haftend**

- › für vorgeschädigte wundumgebende Haut und bei auftretenden Hautirritationen
- › abgeflachte Ränder verringern das Auftreten von Druckstellen

**Biatain®  
Haftarten**

	 selbst-haftend (Silikon)	 sanft-haftend (Silikon)	 selbst-haftend (Hydrokolloid)	 nicht-haftend
<b>Hauttyp</b>				
Normale Haut	✓	✓	✓	✓
Leicht geschädigte Haut	✓	✓	✓	✓
Stark geschädigte Haut	✓	✓		✓
Fragile Haut	✓	✓		✓



## Biatain®

Exzellente Absorption für optimale Wundheilung

### Indikation


Biatain® Schaumverband ist für mittel bis stark exsudierende chronische und akute Wunden indiziert, wie beispielsweise:

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen
- › Brandwunden 2. Grades

**Biatain® nicht-haftend ist für alle Hauttypen geeignet. Biatain® selbst-haftend eignet sich besonders für intakte Umgebungshaut.**

### Vorteile

- › Exzellentes Absorptions- und Rückhaltevermögen
- › Sicher auch unter Kompression
- › Wölbt sich zum Wundgrund

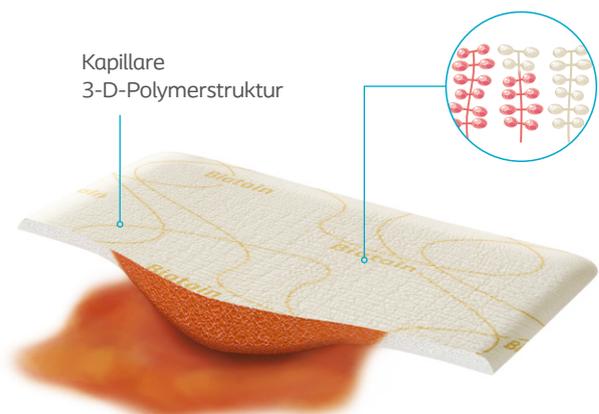



## Kurzbeschreibung

Der Biatain® Schaumverband bietet aufgrund seiner einzigartigen kapillaren 3-D-Polymerstruktur eine exzellente Absorption. Der Verband wölbt sich zum Wundgrund und verhindert so, dass sich Wundexsudat in der Wunde sammelt.

Die Kombination aus vertikaler Absorption, Wölbung und sehr gutem Rückhaltevermögen schützt vor Mazeration und Leckagen. Auf der Außenseite des Verbands schützt eine semipermeable Polyurethanfolie vor Keimen und Feuchtigkeit.

## Produktnutzen

- › Exzellentes Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Schafft ein optimal feuchtes Wundheilungsmilieu
- › Biatain® wölbt sich zum Wundgrund und passt sich den Konturen der Wunde an. So wird der Wundrand geschützt und verhindert, dass sich Exsudat in der Wunde sammelt
- › Biatain® Schäume absorbieren vertikal, dies minimiert das Risiko von Mazeration und Leckagen
- › Die thermisch geglättete Oberfläche verklebt nicht mit der Wunde und ermöglicht so einen atraumatischen Verbandwechsel
- › Biatain® Schäume sind besonders weich und flexibel für einen optimalen Tragekomfort
- › Lange Tragedauer von bis zu 7 Tagen

### EIGENSCHAFTEN



### EXSUDATMENGE



\*Nur bei Biatain® selbst-haftend und Biatain® Sakrum/Ferse  
\*\*Nur bei Biatain® nicht-haftend




Ulcus am Unterschenkel nach dem ersten Verbandwechsel. Exsudat wurde vom Verband vertikal aufgenommen.



Applikation Biatain® nicht-haftend 10 × 10 cm.



Nach einigen Tagen der Behandlung mit Biatain® ist eine Verkleinerung der Wunde und granulierendes Gewebe zu erkennen.

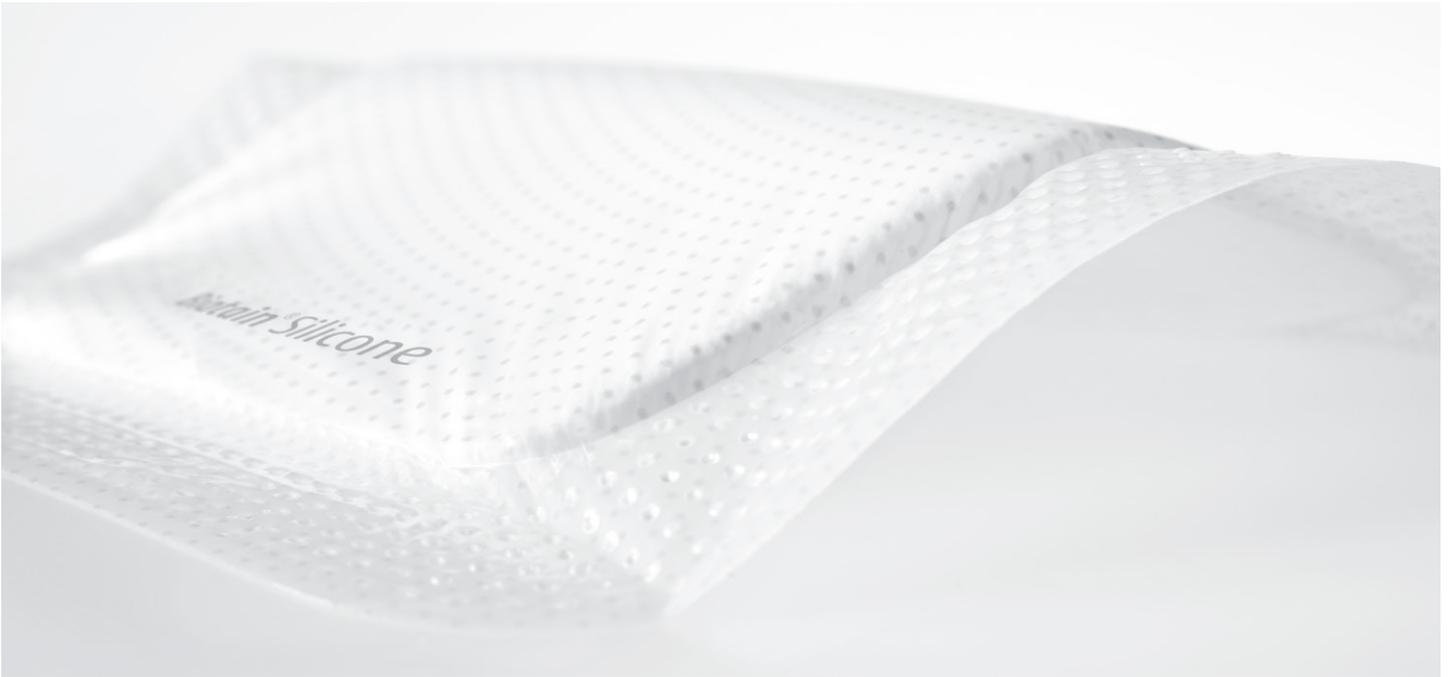

reddot award 2017  
winner

## Biatain® Silicone

Für sanfte Haftung bei exsudierenden Wunden

### Indikation


Biatain® Silicone ist eine vielseitige Lösung für ein breites Spektrum an mittel bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

**Biatain® Silicone ist für alle Hauttypen geeignet, auch für brüchige und fragile Altershaut.**

### Vorteile

- › Einzigartige 3-D-Polymerstruktur wölbt sich zum Wundgrund
- › Reduziert das Risiko von Mazeration und Leckagen
- › Sicherer Halt und schmerzärmer Verbandwechsel

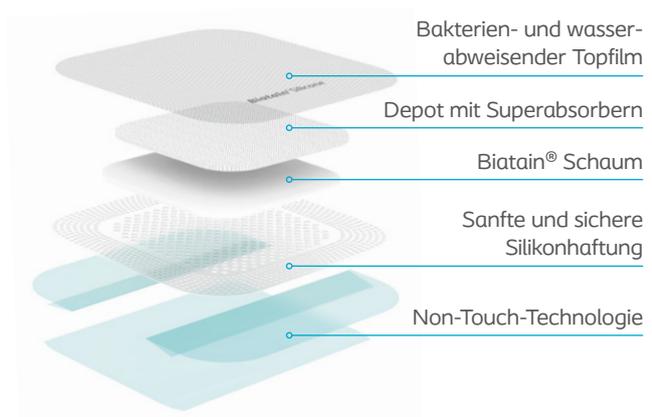



## Kurzbeschreibung

Biatain® Silicone Schaumverband kombiniert den bewährten Biatain®-Schaum mit einem zusätzlichen Superabsorber-Depot und einer sanften Silikonhaftung.

Die sanfte, perforierte Silikonhaftung befindet sich auf der gesamten Fläche des Verbands und bietet dadurch einen sicheren Halt, ohne mit der Wunde zu verkleben. Die Perforation ermöglicht eine exzellente Absorption.

Der semipermeable, wasser- und bakterienabweisende Topfilm schützt die Wunde von außen und ist durchfest. Der Verband besitzt eine 3-teilige Applikationsfolie für eine einfache und aseptische Applikation.


## Produktnutzen

- › Exzellentes Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Absorbiert Wundexsudat vertikal und wölbt sich zum Wundgrund. So wird das Risiko von Mazeration und Leckagen minimiert
- › Der optimale Kontakt zum Wundgrund minimiert das Risiko, dass sich Exsudat in der Wunde sammelt und kann Kosten für einen zusätzlichen Wundfüller sparen
- › Die sanfte Silikonhaftung sorgt für einen sicheren Halt, ohne mit der Wunde zu verkleben und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel
- › Die Applikationsfolie verhindert ein Verkleben mit den Handschuhen
- › Lange Tragedauer von bis zu 7 Tagen

### EIGENSCHAFTEN



### EXSUDATMENGE

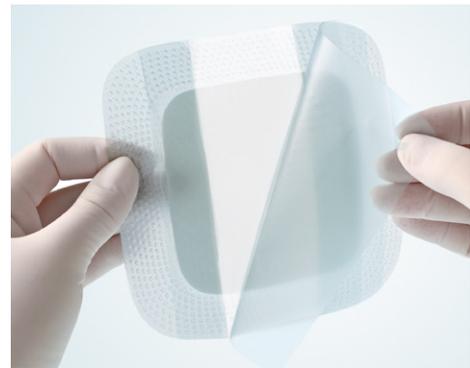

Die 3-teilige Non-Touch-Technologie ermöglicht eine einfache / aseptische Applikation und verhindert ein Verkleben mit Handschuhen.



Die hohe Flexibilität sorgt auch an schwer zu versorgenden Körperstellen für eine sehr gute Passform und ein optimales Tragegefühl.



Biatain® Silicone wölbt sich zum Wundgrund und passt sich optimal den Konturen der Wunde an.



## Biatain® Silicone Non-Border

Für sanfte Haftung bei exsudierenden Wunden

### Indikation


Biatain® Silicone ist eine vielseitige Lösung für ein breites Spektrum an mittel bis stark exsudierenden chronischen Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom

*Biatain® Silicone Non-Border ist für alle Hauttypen geeignet, auch für brüchige und fragile Altershaut.*

### Vorteile

- › Wölbt sich zum Wundgrund, stellt einen direkten Kontakt her und reduziert Exsudatansammlungen
- › Ideal unter Kompression einsetzbar
- › Zuschneidbar, daher geeignet für schwer zu versorgende Körperregionen (bspw. Finger, Zehen, usw.)
- › »Dritte« Hand beim Verbandwechsel

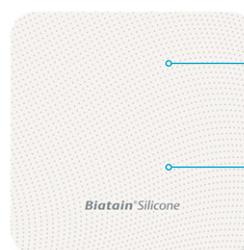

Bewährter Biatain®  
Schaum mit  
3DFit Technologie

Sanfte, vollflächige  
Silikonhaftung



## Kurzbeschreibung

Biatain® Silicone Non-Border Schaumverband kombiniert die bewährte 3DFit Technologie des Biatain® Schaums mit einer vollflächigen Silikonhaftung ohne Haftrand.

Die sanfte, perforierte Silikonhaftung befindet sich auf der gesamten Fläche des Verbands und bietet dadurch einen sicheren Halt, ohne mit der Wunde zu verkleben, diese Perforation ermöglicht ausserdem eine exzellente Absorption. Der semipermeable, bakterienabweisende Topfilm schützt die Wunde von außen. Der Verband besitzt eine 3-teilige Applikationsfolie für eine einfache und aseptische Applikation.


## Produktnutzen

- › Wölbt sich zum Wundgrund und stellt einen direkten Kontakt her, um Exsudatansammlungen zu reduzieren
- › Ideal mit Kompressionstherapie kombinierbar, Exsudat wird vertikal absorbiert und sicher zurückgehalten
- › Wundrand wird geschützt und Mazerationen und Leckagen minimiert
- › Schafft ein optimal feuchtes Wundheilungsmilieu
- › Zuschneidbar, daher geeignet für schwer zu versorgende Körperregionen (z. B. Finger, Zehen, usw.)
- › Weich und anschmiegsam und daher optimal für das Anbringen in Hautfalten
- › Sanfte, vollflächige Silikonhaftung dient als »dritte« Hand beim Verbandwechsel und erleichtert so die Applikation
- › Lange Tragedauer von bis zu 7 Tagen und wirtschaftliche Versorgung durch möglichen Verzicht von zusätzlichen Wundfüllern

### EIGENSCHAFTEN



### EXSUDATMENGE

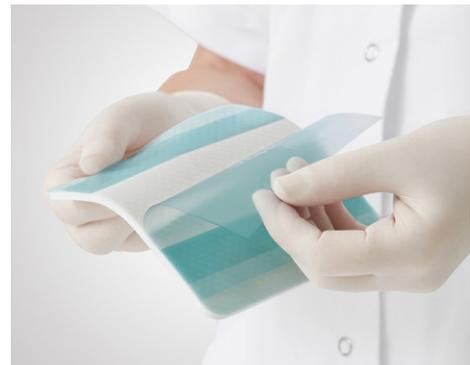

3-teilige Non-Touch-Technologie zur einfachen und aseptischen Applikation.



Biatain® Silicone Non-Border ist zuschneidbar, daher ideal geeignet für schwer zu versorgende Körperregionen (z. B. Finger, Zehen, usw.).



Exsudat wird auch unter Kompression absorbiert und im Schaumverband sicher zurückgehalten.



## Biatain® Silicone Lite

Für sanfte Haftung bei schwach exsudierenden Wunden

### Indikation


Biatain® Silicone Lite ist ein dünner und sehr flexibler Schaumverband für schwach bis mittelstark exsudierende chronische und akute Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

*Biatain® Silicone Lite ist für alle Hauttypen geeignet, auch für brüchige und fragile Altershaut.*

### Vorteile

- › Exzellente Absorption für schwach bis mittelstark exsudierende Wunden
- › Sehr dünn und besonders flexibel
- › Kann helfen postoperative Blasenbildung zu verhindern

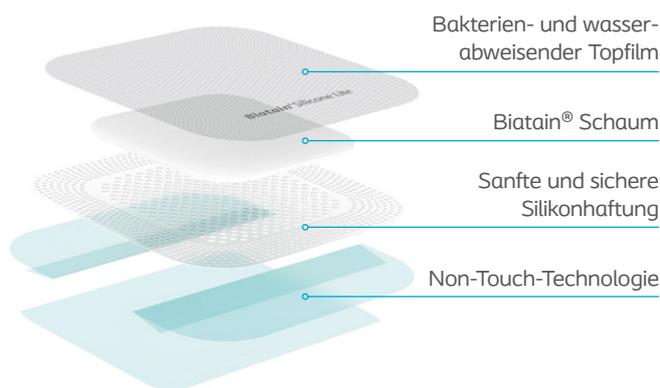



## Kurzbeschreibung

Biatain® Silicone Lite ist ein besonders dünner, sehr flexibler und anpassungsfähiger Schaumverband.

Die sanfte, perforierte Silikonhaftung befindet sich auf der gesamten Fläche des Verbands und bietet dadurch einen sicheren Halt, ohne mit der Wunde zu verkleben. Die Perforation ermöglicht eine exzellente Absorption.

Der Topfilm schützt die Wunde von außen und ist duschfest. Der Verband besitzt eine 3-teilige Applikationsfolie für eine einfache und aseptische Applikation.

## Produktnutzen

- › Exzellentes Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Der Verband wölbt sich zum Wundgrund und passt sich den Konturen der Wunde an. So wird das Risiko von Mazeration und Leckagen minimiert
- › Die sanfte Silikonhaftung sorgt für einen sicheren Halt ohne mit der Wunde zu verkleben. Dies ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel
- › Aufgrund des semipermeablen, wasser- sowie bakterienabweisenden Topfilms wird dem Patienten das Duschen ermöglicht
- › Die 3-teilige Non-Touch-Technologie erleichtert eine einfache und aseptische Applikation
- › Lange Tragedauer von bis zu 7 Tagen

### EIGENSCHAFTEN



### EXSUDATMENGE



Der Verband ermöglicht durch seine besondere Flexibilität eine sichere Versorgung an schwer zu versorgenden Körperstellen.



Biatain® Silicone Lite eignet sich auch für Akutwunden.



Exzellente Absorption für schwach bis mittelstark exsudierende Wunden.

# Das erweiterte Biatain® Silicone Sortiment

Biatain Silicone ist für chronische als auch für akute Wunden geeignet.

Biatain Silicone Multishape



Geeignet für bspw.:

- › Ulcus Cruris am Knöchel
- › Entlang der Wirbelsäule
- › An versch. Gelenken
- › In der Leistengegend
- › Nach Schilddrüsen-OP

Biatain Silicone



Geeignet für bspw.:

- › Ulcus Cruris
- › Bauchchirurgische Eingriffe, z. B. Kaiserschnitte
- › Spalthautentnahmestellen
- › Hüft- und Leisten-OP's
- › Herz- und Thoraxchirurgie
- › Schilddrüsen-OP

Biatain Silicone



Geeignet für bspw.:

- › Ulcus Cruris
- › Dekubitus
- › Hautabschürfungen
- › Diabetisches Fussyndrom

# Innovative Formen und Grössen: Entwickelt von Fachkräften – geformt für Patienten.

*Biatain Silicone Sakrum\**




Geeignet für bspw.:

- › Dekubitus
- › Ulcus Cruris an der Wade

Biatain Silicone ist für alle Hauttypen geeignet, auch für brüchige und fragile Altershaut.

\*Kann nach Bedarf in beide Richtungen appliziert werden

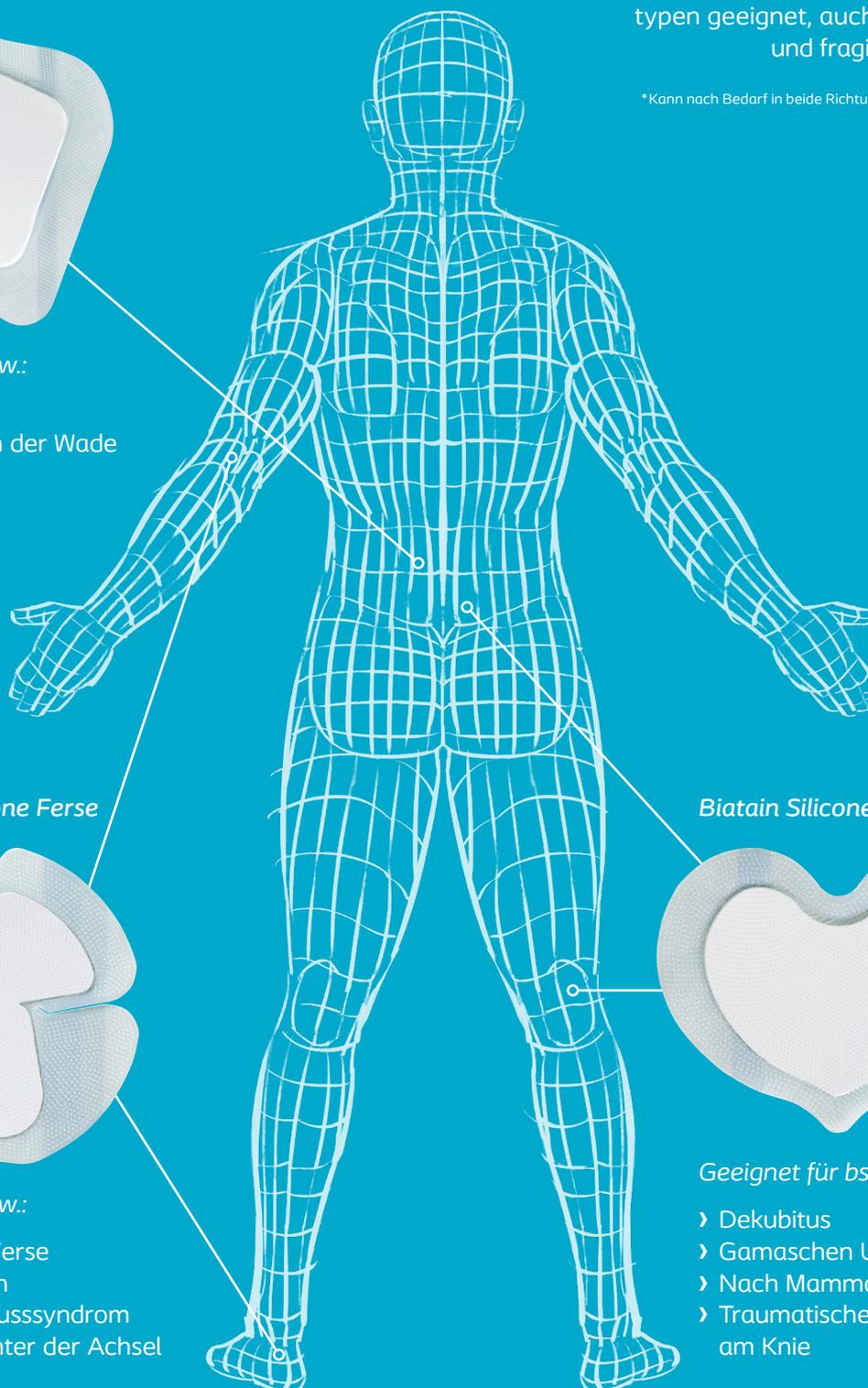

*Biatain Silicone Ferse*



Geeignet für bspw.:

- › Dekubitus an Ferse und Ellenbogen
- › Diabetisches Fussyndrom
- › OP-Wunden unter der Achsel

*Biatain Silicone Sakrum\**



Geeignet für bspw.:

- › Dekubitus
- › Gamaschen Ulcus
- › Nach Mammoplastik
- › Traumatische Wunden am Knie



## Biatain® Ag

Für lokal infizierte Wunden

### Indikation


Biatain® Ag ist für mittel bis stark exsudierende, bakteriell belastete chronische und akute Wunden indiziert, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Diabetische Fußulcera
- › Brandwunden 1. und 2. Grades
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

**Biatain® Ag nicht-haftend ist für alle Hauttypen geeignet. Biatain® Ag selbst-haftend eignet sich besonders bei intakter Umgebungshaut.**

### Vorteile

- › Exzellentes Exsudatmanagement
- › Wölbt sich zum Wundgrund
- › Effektive antimikrobielle Wirksamkeit auch gegen MRSA, VRE, ESBL und Pseudomonas

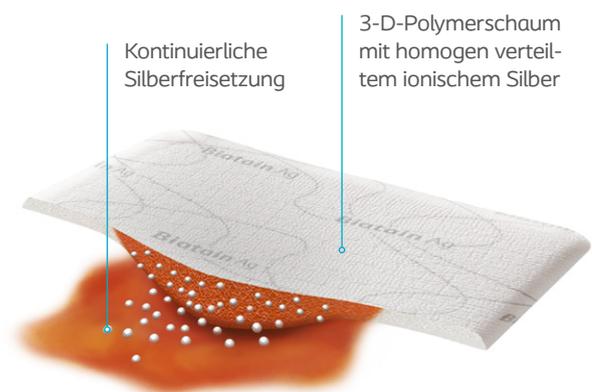



## Kurzbeschreibung

Biatain® Ag Schaumverband ist ein antimikrobieller Verband mit 1,0 mg/cm<sup>2</sup> ionischem Silber, der ein optimales Wundheilungsmilieu schafft und erhält.

Der Schaumverband basiert auf der bewährten 3-D-Polymerstruktur von Biatain®. Er enthält zusätzlich homogen verteilte, antimikrobiell wirksame Silberkomplexe. Bei Kontakt mit Wundexsudat werden Silberionen im Austausch mit Natriumionen in Abhängigkeit der aufgenommenen Exsudatmenge kontrolliert freigesetzt. So kann die Keimbelastung und die lokale Infektion effektiv reduziert werden.

## Produktnutzen

- › Exzellentes Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Wölbt sich zum Wundgrund und minimiert so das Risiko von Mazeration und Leckagen
- › Schnellere Wundheilung durch effektive antimikrobielle Wirksamkeit
- › Kontinuierliche Silberfreisetzung über die gesamte Tragedauer von bis zu 7 Tagen
- › Kosten- und Zeitersparnis durch verlängerte Verbandwechselintervalle
- › Wirkt auch gegen antibiotikaresistente Keime wie MRSA, VRE und ESBL

### EIGENSCHAFTEN



\*Nur bei Biatain® Ag selbst-haftend

\*\*Nur bei Biatain® Ag nicht-haftend

### EXSUDATMENGE




Dekubitus mit Wundheilungsstörung aufgrund bakterieller Belastung.



Keimreduzierung durch exzellentes Exsudatmanagement und effektive Silberfreisetzung.



Wundversorgung mit Biatain® Ag.

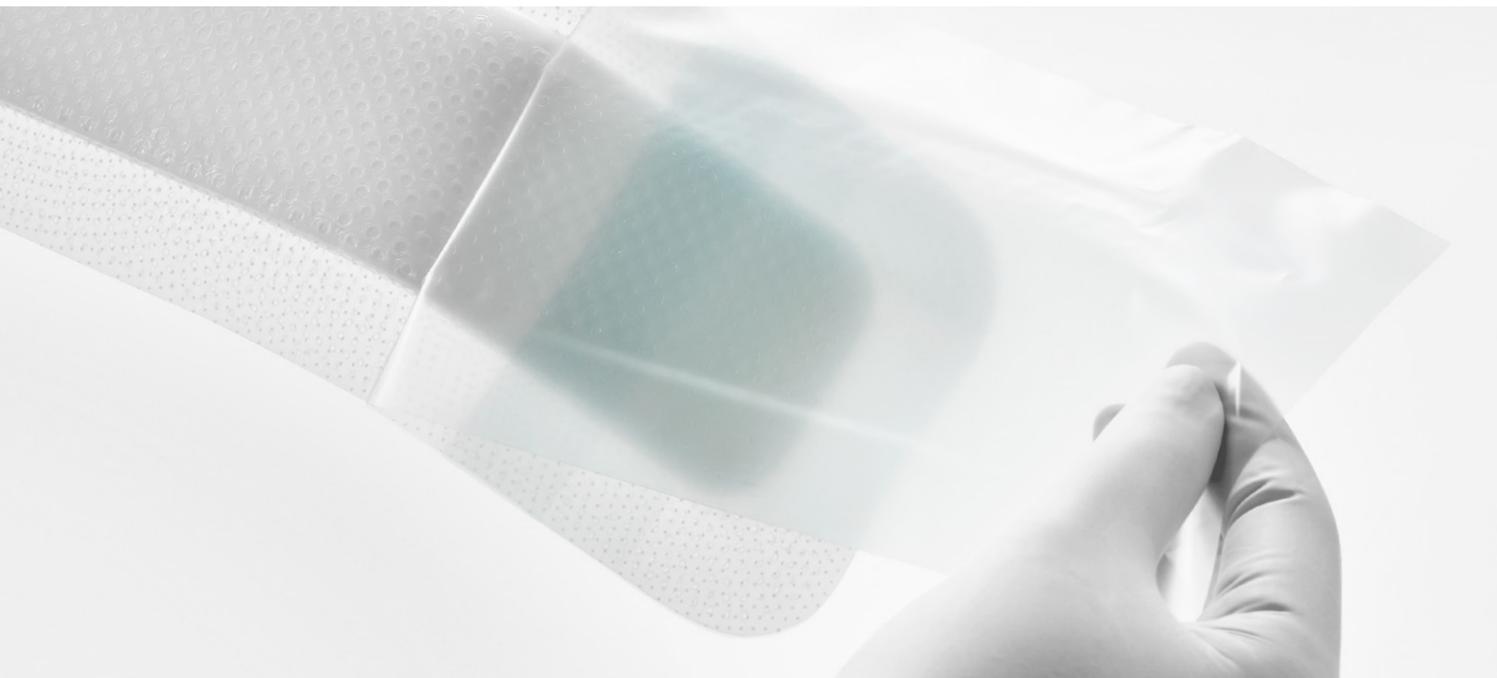

## Biatain® Silicone Ag

Für sanfte Haftung bei lokal infizierten Wunden

### Indikation


Biatain® Silicone Ag ist für ein breites Spektrum an mittel bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden mit verzögerter Heilung aufgrund von Bakterien oder für Wunden mit Infektionsrisiko indiziert, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Diabetische Fußulcera
- › Verbrennungen 2. Grades
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

**Biatain® Silicone Ag ist für alle Hauttypen geeignet. Auch für brüchige und fragile Altershaut.**

### Vorteile

- › Wölbt sich zum Wundgrund
- › Exzellente Absorption
- › Wirkt auch gegen MRSA, VRE, ESBL und Pseudomonas

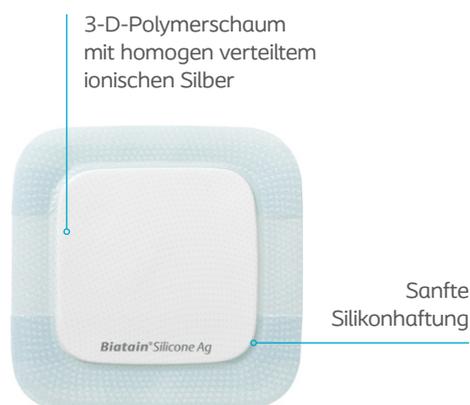



## Kurzbeschreibung

Biatain® Silicone Ag Schaumverband bietet eine exzellente Absorption und einen sanften und sicheren Halt bei kontinuierlicher effektiver Silberfreisetzung.

Der Verband setzt bis zu 7 Tagen kontinuierlich und kontrolliert ionisches Silber frei und wirkt so im Schaum und in der Wunde gegen die üblicherweise in infizierten, nicht heilenden Wunden vorkommenden Bakterien, auch gegen MRSA, VRE, ESBL und Pseudomonas.

Die perforierte, vollflächige Silikonhaftung bietet einen sicheren Halt, ohne mit der Wunde zu verkleben und ermöglicht eine exzellente Absorption und Silberfreisetzung. Der semipermeable, wasser- sowie bakterienabweisende Topfilm schützt die Wunde von außen und ist duschfest.

## Produktnutzen

- › Exzellentes Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Wölbt sich und ermöglicht so einen optimalen Kontakt zum Wundgrund. Dies minimiert das Risiko von Mazeration und Leckagen und schützt den Wundrand
- › Kann durch die Wölbung Kosten für einen Wundfüller sparen
- › Die hohe Flexibilität sorgt auch an schwer zu versorgenden Körperstellen für eine sehr gute Passform und ein optimales Tragegefühl
- › Sanfte Silikonhaftung sorgt für einen sicheren Halt und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel
- › Wirksam gegen die häufigsten Wundkeime – im Verband und in der Wunde
- › Effektive Silberabgabe zur schnellen Abtötung von Bakterien

### EIGENSCHAFTEN



### EXSUDATMENGE



3-teilige Non-Touch-Technologie zur einfachen und aseptischen Applikation.



Kontinuierliche Silberfreisetzung über die gesamte Tragedauer von bis zu 7 Tagen.



Exzellente Absorption und Silberfreisetzung für bakteriell belastete/lokal infizierte Wunden.



## Biatain® Ibu

Exzellente Absorption für schmerzhafte Wunden

### Indikation

Biatain® Ibu Schaumverband für mittel bis stark exsudierende und durch Gewebeschädigung schmerzende Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen (nur nicht-haftend)
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen
- › Brandwunden 2. Grades
- › Für Wunden, die keine tieferen Schichten als die Haut betreffen.

**Biatain® Ibu sanft-haftend und nicht-haftend sind für alle Hauttypen geeignet.**

### Vorteile

- › Exzellente Absorption auch unter Druck
- › Effektive lokale Wirkung
- › Schnelle Schmerzlinderung





## EIGENSCHAFTEN

## EXSUDATMENGE



## Kurzbeschreibung

Biatain® Ibu kombiniert den bewährten Biatain-Schaum mit einer lokalen und kontinuierlichen Freisetzung von Ibuprofen.

Durch die 3-D-Polymerstruktur des Schaumes wird Wundexsudat schnell absorbiert und sicher gespeichert. Pro cm<sup>2</sup> sind 0,5 mg Ibuprofen homogen im Schaum verteilt.

In Abhängigkeit der Exsudatmenge wird das Ibuprofen lokal in die Wunde abgegeben und kann so durch Gewebeschädigungen bedingten Wundschmerz reduzieren.



Schmerzhafte Wunde im Bereich der Ferse.

## Produktnutzen


- › Exzellentes Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Schafft ein optimal feuchtes Wundheilungsmilieu
- › Der Verband wölbt sich zum Wundgrund und absorbiert vertikal. So wird das Risiko von Mazeration und Leckagen minimiert
- › Lokale Freisetzung und Wirkung von Ibuprofen ohne systemische Belastung
- › Kann durch Gewebeschädigungen bedingte Wundschmerzen reduzieren
- › Schnelle und langanhaltende Wirkung auch während des Verbandwechsels (bis zu 7 Tage)
- › Erhöht die Lebensqualität des Patienten



Nach 2 Wochen: Wundgröße verringert, gesundes Granulationsgewebe, keine Mazeration.



Biatain® Ibu lässt sich auch an schwer zu versorgenden Körperstellen optimal anmodellieren.

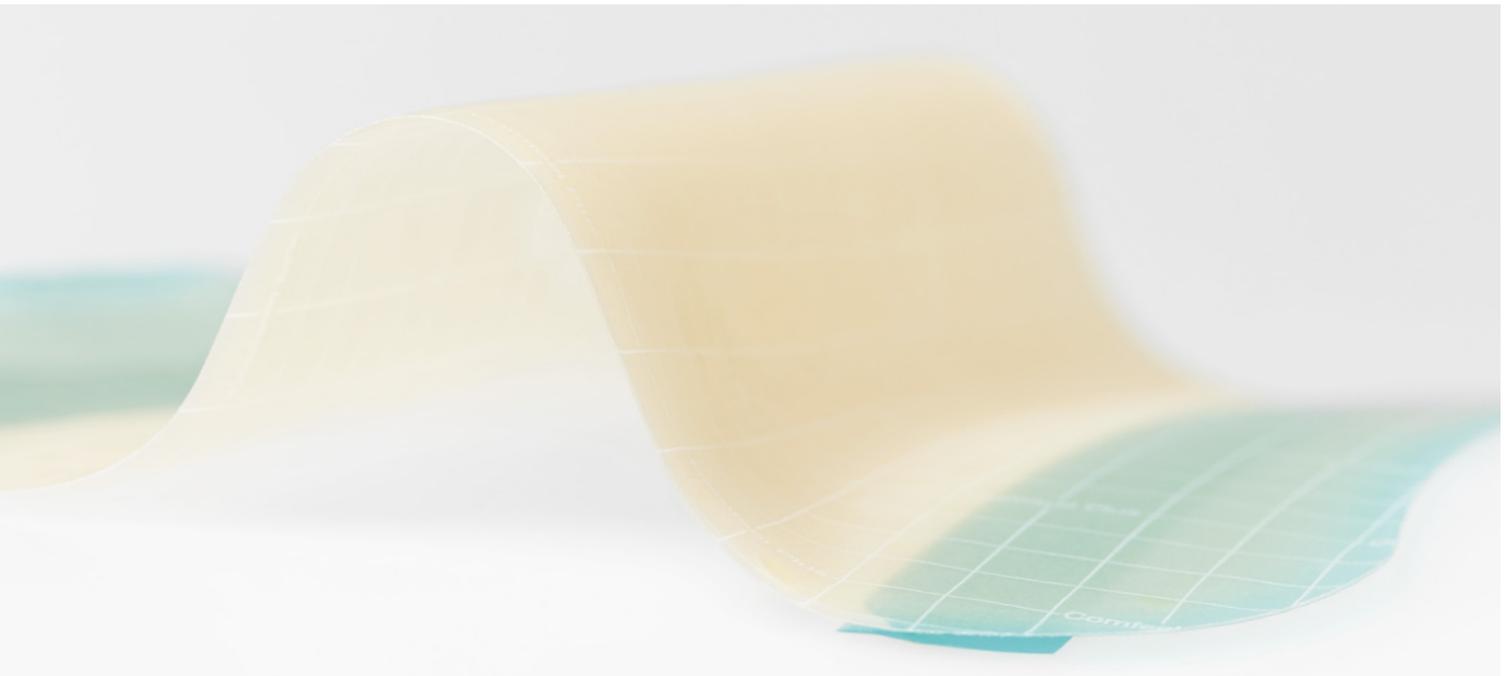

## Comfeel® Plus Flexibel

Sicherer Schutz und optimale Wundheilung


### Indikation

Comfeel® Plus Flexibel ist für die Behandlung von schwach bis mittelstark exsudierenden chronischen und akuten Wunden indiziert, insbesondere für:

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Brandwunden 1. und 2. Grades
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

### Vorteile

- › Besonders flexibel
- › Hautfreundlich
- › Enthält CMC und Alginat

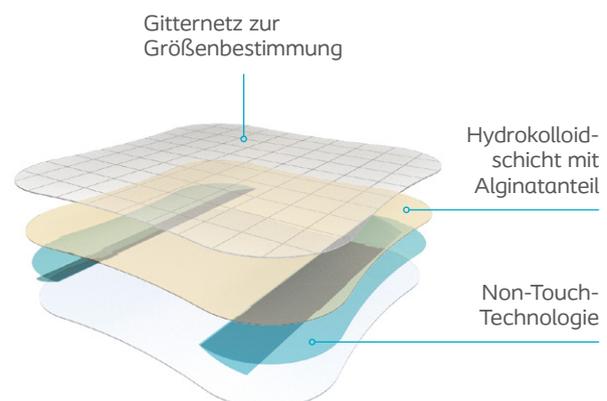




## Kurzbeschreibung


Comfeel® Plus Flexibel ist ein besonders anpassungsfähiger und hautfreundlicher Hydrokolloidverband.

In der selbsthaftenden Hydrokolloidmatrix sind stark quellfähige Natrium-Carboxymethylcellulose (CMC)-Partikel und Calciumalginat eingebettet, die für eine höhere Absorptionsfähigkeit sorgen.

Durch die semipermeable Polyurethanfolie passt sich die Verdunstungsrate der Menge des Exsudates an, wodurch unter dem Verband stets ein optimal feuchtes Wundmilieu besteht. Zusätzlich schützt die semipermeable Folie die Wunde vor Bakterien und Infektionen.

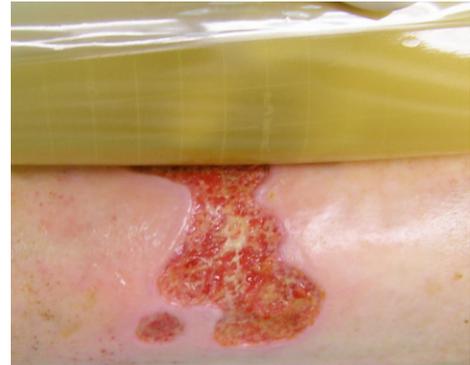

Sterile Applikation von Comfeel® Plus Flexibel.

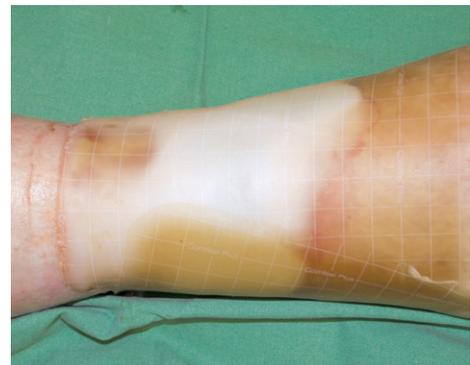


Sobald sich die gebildete Gelblase dem Verbandrand nähert, sollte der Verband gewechselt werden.



Ablösen des gelierten Verbands.

## Produktnutzen

- › Die Oberfläche ermöglicht eine problemlose Grundpflege. Mobile Patienten können mit dem Verband duschen und baden
- › 3-teilige Non-Touch-Technologie für eine aseptische und einfache Applikation
- › Abgeflachte Kanten wirken einem Aufrollen des Verbands entgegen
- › Einfache Wundgrößenbestimmung durch Gitternetz
- › Sehr flexibel für eine einfache Anwendung und mehr Patientenkomfort
- › Erhöhte Exsudatmanagement-Eigenschaften schaffen ein optimal feuchtes Wundmilieu und erhöhen die Tragedauer

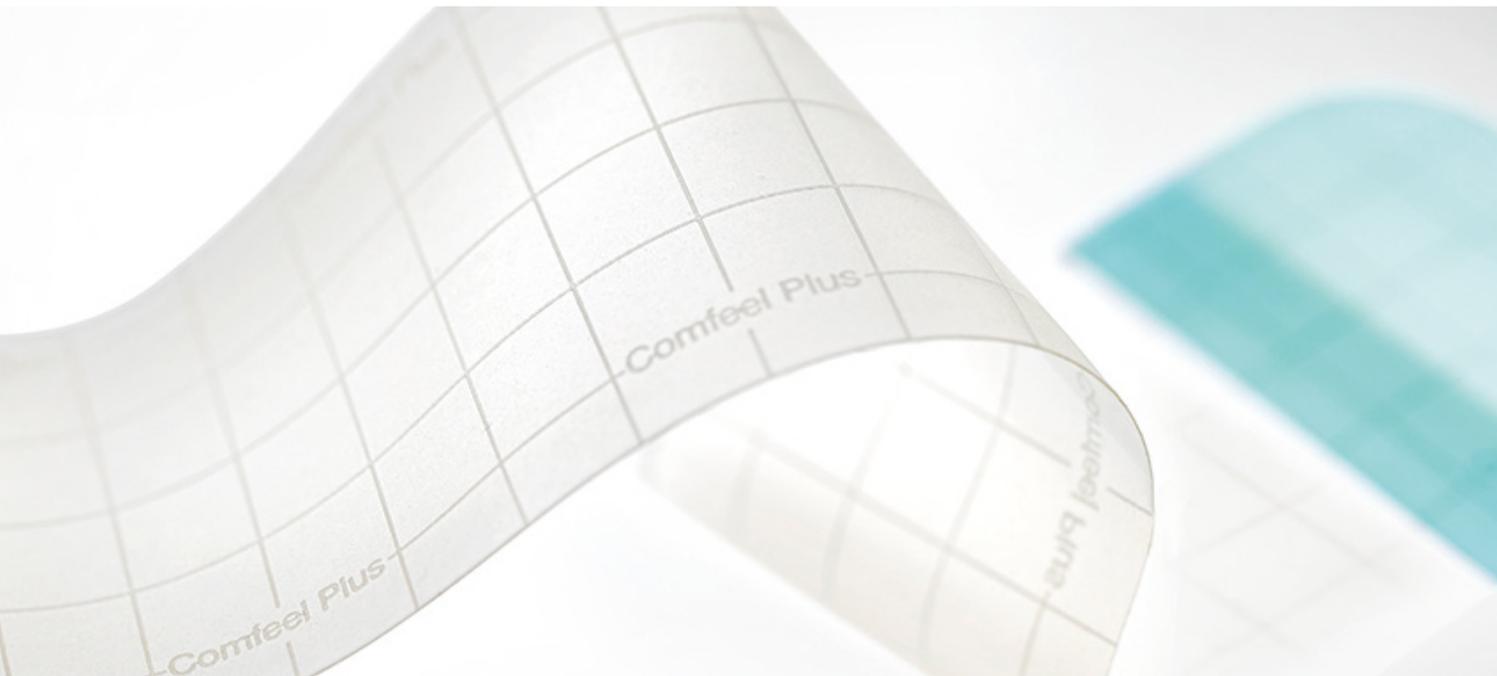

## Comfeel® Plus Transparent

Für Schutz und Kontrolle


### Indikation

Comfeel® Plus Transparent ist angezeigt bei oberflächlichen, akuten Wunden oder bei bereits epithelisierenden Wunden, wie z. B.

- › Postoperative Wunden
- › Spalthautentnahmestellen
- › Abschürfungen
- › Verbrennungen 1. und 2. Grades
- › Oberflächliche, chronische Wunden in der Epithelisierungsphase

### Vorteile

- › Transparent
- › Hautfreundlich
- › Hoher Tragekomfort

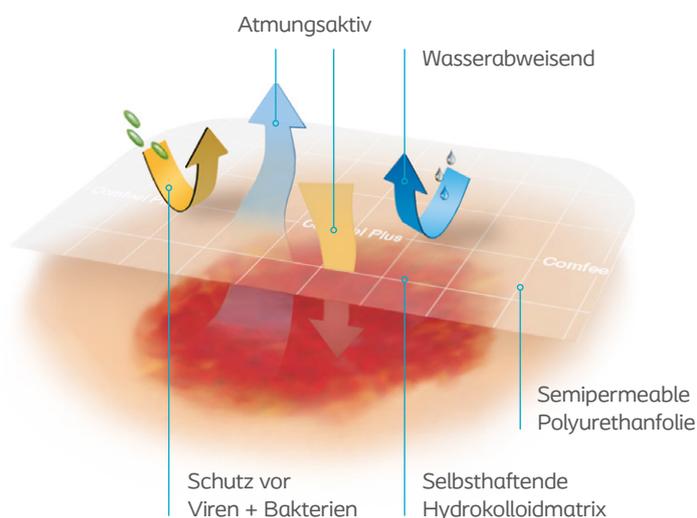



## Kurzbeschreibung

Comfeel® Plus Transparent ist ein besonders dünner, durchsichtiger Hydrokolloidverband.

In der stabilen, selbsthaftenden Hydrokolloidmatrix sind Carboxymethylcellulose (CMC)-Partikel eingebettet, die mit dem Wundexsudat ein kohäsives Gel bilden, welches die Wunde schützt und ein Verkleben mit dem neu gebildeten Epithel verhindert.

Die semipermeable Polyurethanfolie sorgt für ein stets optimal feuchtes Wundmilieu und schützt die Wunde vor Bakterien und Feuchtigkeit.



Flexibel und dünn zum Versorgen an schwierigen Körperstellen.

## Produktnutzen

- › Die hohe Transparenz ermöglicht eine Wundinspektion ohne Verbandwechsel
- › Flexibel und dünn für hohen Tragekomfort und eine einfache Anwendung; auch an schwer zu versorgenden Körperregionen
- › Einfache Wundgrößenbestimmung durch Gitternetz
- › 3-teilige Non-Touch-Technologie für eine aseptische und einfache Applikation
- › Glatte Oberfläche sorgt für weniger Reibungs- und Scherkräfte
- › Passt sich wie eine zweite Haut an und reduziert so das Risiko von Spannungsblasen
- › Wasserabweisende Oberfläche ermöglicht problemlos die Grundpflege und ist duschfest



Einfaches und schnelles Bestimmen der Wundgröße dank Transparenz und Gitternetz.



Comfeel® Plus Transparent verklebt nicht mit dem Nahtmaterial.



## Biatain® Super

Für stark exsudierende Wunden

### Indikation

Biatain® Super Hydrokapillarverband für leicht bis sehr stark exsudierende Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera


Verbände können während des gesamten Heilungsverlaufs eingesetzt werden. Zum Schutz von:

- › Brandwunden 2. Grades
- › Chirurgischen Wunden
- › Hautabschürfungen

**Biatain® Super nicht-haftend eignet sich für alle Hauttypen, Biatain® Super selbst-haftend insbesondere für intakte Umgebungshaut.**

### Vorteile

- › Sehr saugstark mit Superabsorbentien
- › Sehr gutes Rückhaltevermögen
- › Einfache Handhabung

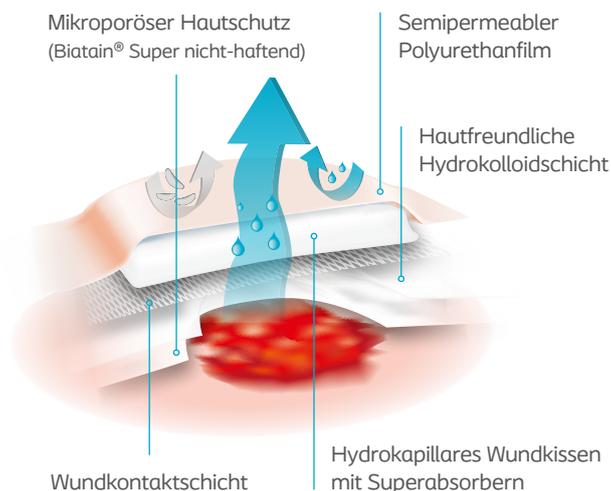

## EIGENSCHAFTEN

## EXSUDATMENGE



## Kurzbeschreibung

Biatain® Super ist ein Hydrokapillarverband mit Superabsorbentien insbesondere zur Versorgung von sehr stark exsudierenden Wunden. Durch den halbtransparenten, semipermeablen Polyurethan-Topfilm kann überschüssige Feuchtigkeit verdunsten und die Wunde wird vor Keimen und Feuchtigkeit von außen geschützt. Eine Wundkontaktschicht verhindert das Verkleben des Verbands mit der Wunde.

Biatain® Super selbst-haftend verfügt über einen hautfreundlichen Hydrokolloidhafrand, die nicht-haftende Variante über einen mikroporösen Hautschutz.

## Produktnutzen

- › Gute Absorptionseigenschaften und gutes Rückhaltevermögen
- › Hohe Aufnahmekapazität
- › Schafft ein optimal feuchtes Wundmilieu
- › Schützt neu gebildetes Gewebe ohne mit der Wunde zu verkleben
- › Wirtschaftlicher Einsatz durch lange Tragedauer
- › Ermöglicht dem Patienten das Duschen

\*Nur bei Biatain® Super selbst-haftend

\*\*Nur bei Biatain® Super nicht-haftend



Ausgangssituation: Dekubitus Grad II, Größe ca. 2 x 1 cm, Wundumgebung mazeriert



Nach 2 Wochen: Wundgröße verringert, gesundes Granulationsgewebe, keine Mazeration



Nach 4 Wochen: Dekubitus fast abgeheilt, Umgebungshaut gesund



## Biatain® Alginate

Für belegte Wunden und Wundhöhlen


### Indikation

Biatain® Alginate ist vorwiegend anzuwenden zur Wundreinigung oder als Wundfüller bei mittelstark bis stark exsudierenden Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Diabetisches Fußsyndrom
- › Verbrennungen 1. und 2. Grades

### Vorteile

- › Reinigende Wirkung
- › In einem Stück entfernbar
- › Lokale Absorption

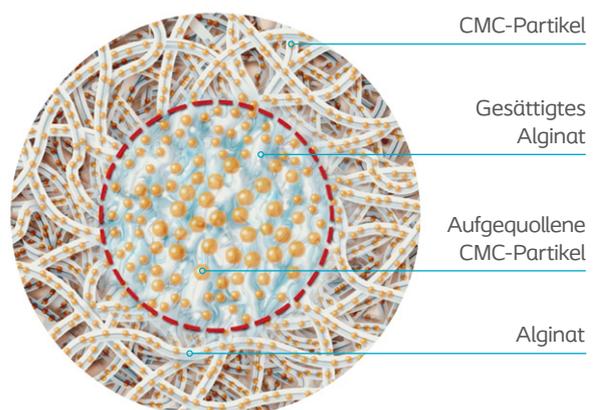



## Kurzbeschreibung

Biatain® Alginate besteht zu 85 % aus Calciumalginat und zu 15 % aus hydrokolloiden Carboxymethylcellulose-Partikeln (CMC).

Die verwebte Materialstruktur bildet durch Ionenaustausch in Verbindung mit dem absorbierten Exsudat ein kohäsives Gel, das die Wunde feucht hält und Wundsekret sowie Gewebetrümmer aufnimmt und sicher einschließt.



Postoperative, sekundär heilende Wunde.



Applikation von Biatain® Alginate in die Wunde.



Biatain® Alginate benötigt immer einen geeigneten Sekundärverband (z. B. Comfeel® Plus oder Biatain® Silicone).

## Produktnutzen

- › Natürliche Reinigungsfunktion
- › Schnelle, lokale Absorptionsfähigkeit und gutes Rückhaltevermögen für reduziertes Mazerationsrisiko
- › Erhöhte Absorptionskapazität durch Materialkombination aus Calciumalginat und CMC-Partikeln sorgt für längere Tragezeit und weniger Verbandwechsel
- › Fördert die Wundheilung durch ein ideal feuchtes Wundmilieu
- › Weiche und gut applizierbare Materialkombination passt sich den Konturen der Wunde an
- › Einfach und atraumatisch in einem Stück entfernbar, ohne Rückstände in der Wunde
- › Blutstillender Effekt durch Calcium-Ionen



## Biatain® Alginate Ag

Für belegte, lokal infizierte Wunden und Wundhöhlen

### Indikation


Der Biatain® Alginate Ag ist angezeigt bei mittelstark bis stark exsudierenden Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitus
- › Diabetisches Fußsyndrom
- › Postoperative Wunden
- › Traumatische Wunden
- › Hautentnahmestellen
- › Wundhöhlen
- › Oberflächliche und mitteltiefe Verbrennungen

Biatain® Alginate Ag kann bei der Behandlung lokal infizierter Wunden oder Wunden, die einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden.

### Vorteile

- › Natürliche Reinigung
- › In einem Stück entfernbar
- › Antimikrobielle Wirksamkeit

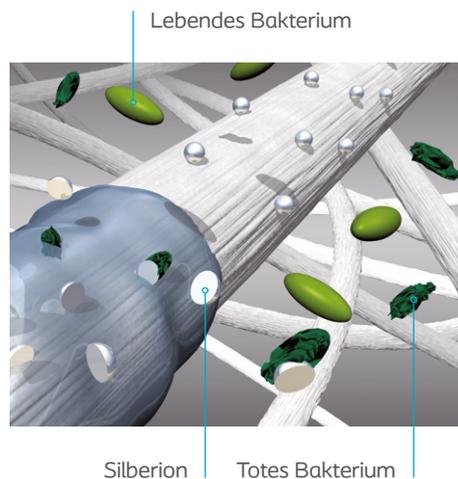

## EIGENSCHAFTEN



## EXSUDATMENGE




## Kurzbeschreibung

Biatain® Alginate Ag ist eine hochsaugfähige, antimikrobielle Wundauflage aus Calciumalginat und Carboxymethylcellulose (CMC) und 0,5 % ionischem Silber.

Bei Exsudataufnahme bildet sich ein kohäsives, strukturbeständiges Gel, das die Wunde feucht hält sowie Wundsekrete, abgetötete Bakterien und Gewebetrümmer sicher einschließt.

Zusätzlich werden in Abhängigkeit von der aufgenommenen Exsudatmenge Silberionen freigesetzt (Hydroaktivierung). Eine antimikrobielle Wirkung tritt im sich formenden Gel und am Wundgrund ein.

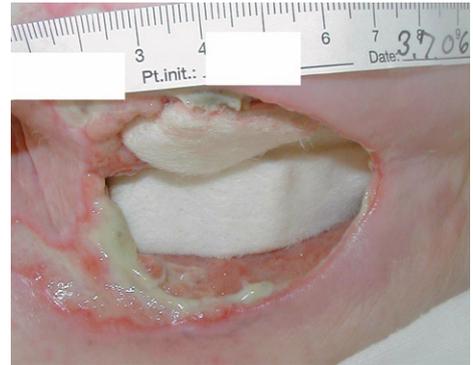

Applikation von Biatain® Alginate Ag zu Behandlungsbeginn.



Beim nächsten Verbandwechsel ist Biatain® Alginate Ag komplett geliert.

## Produktnutzen

- › Schnelle, lokale Absorptionsfähigkeit und gutes Rückhaltevermögen für reduziertes Mazerationsrisiko
- › Materialkombination erhöht die Aufnahmekapazität und sorgt für längere Tragezeit und weniger Verbandwechsel
- › Fördert die Wundheilung durch ideal feuchtes Wundmilieu, natürliche Reinigungsfunktion und Reduktion der Keimbelastung
- › Weiche und gut applizierbare Materialkombination passt sich den Konturen der Wunde an
- › Breite antimikrobielle Wirksamkeit gegen die häufigsten Oberflächen- und Gewebekakterien in chronischen Wunden. Wirkt auch gegen *Candida albicans*, MRSA und VRE
- › Kohäsives, strukturbeständiges Gel ermöglicht einfaches und atraumatisches Entfernen in einem Stück



Wunde nach Wundspülung am 18. Behandlungstag.



## InterDry®

### Die effektive Versorgung von Hautfalten


#### Indikation

InterDry® ist für die Verwendung als Hautschutz zur Versorgung von Hautschäden in Hautfalten und/oder anderen Bereichen, in denen Haut auf Haut aufliegt, bestimmt.

Es ist indiziert für die Verwendung auf der Haut zwischen einander berührenden Hautflächen, wo es durch Perspiration und Reibung zu Entzündungen und/oder Reizungen kommt bzw. dies zu erwarten ist. Die Symptome werden auch als Intertrigo bezeichnet.

#### Vorteile

- › Transportiert Feuchtigkeit aus der Hautfalte heraus
- › Minimiert Reibung von Haut-auf-Haut
- › Bekämpft Pilze und Bakterien mit antimikrobiellen Silberkomplex

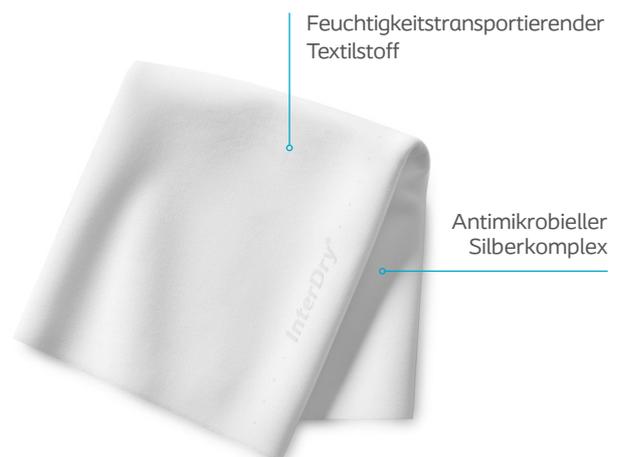

## Kurzbeschreibung

InterDry® ist ein unsteriler weicher, feuchtigkeitstransportierender Textilstoff mit einem antimikrobiellen Silberkomplex, der auf alle drei Risikofaktoren abzielt, die mit der Schädigung der Hautfalte verbunden sind: Feuchtigkeit, Reibung und Bakterien sowie Pilze.

Der weiche Polyesterstoff leitet die Feuchtigkeit aus der Hautfalte heraus, wo sie dann verdunsten kann. Durch eine einzigartige, patentierte Technologie reduziert InterDry® die Reibung von Haut-auf-Haut.

Zudem enthält InterDry® einen antimikrobiellen Silberkomplex, der ein breites Spektrum an Pilzen und Bakterien, die üblicherweise in Hautfalten vorkommen, über die gesamte Tragedauer von bis zu 5 Tagen bekämpft.



InterDry® sollte mindestens 5 cm aus der Hautfalte herausragen, so dass die Feuchtigkeit verdunsten kann.

## Produktnutzen

- › Reduziert klinisch nachgewiesene Symptome der Intertrigo innerhalb von wenigen Tagen
- › Schnelle Reduzierung der Symptome steigert die Lebensqualität der Patienten und senkt gleichzeitig die Kosten der Behandlung.
- › Weiches, flexibles Material sorgt für hohen Tragekomfort
- › Einfache Handhabung und Anwendung
- › Zuschneidbar auf die benötigte Größe für die betroffene Hautfalte



Vor der Anwendung von InterDry®:  
Erythem, Schmerzen, Juckreiz, Geruch



Nach der Anwendung von InterDry®:  
Fast vollständige Abheilung nach 7 Tagen



# Purilon®

## Zur sanften Auflösung von Nekrosen

Purilon® Gel ist ein klares, amorphes Hydrogel mit Alginatzusatz. Der hohe Wasseranteil von 90% bewirkt eine schnelle Rehydratisierung und Aufweichung trockenen Gewebes. Nekrosen

und Beläge werden schonend abgetragen (autolytisches Débridement), ohne das neu gebildete Gewebe zu schädigen.

### Indikation

Purilon® Hydrogel ist hauptsächlich bei nekrotischen, belegten und trockenen sekundärheilenden Wunden anzuwenden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Brandwunden 1. und 2. Grades

Bei infizierten Wunden kann Purilon® Gel unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden. Purilon® Gel benötigt immer einen Sekundärverband\*.

### Produktnutzen

- › Kommt ohne Konservierungsstoffe aus und ist so noch schonender
- › Ermöglicht ein sanftes Débridement
- › Kombination aus CMC und Alginat erhöht die Absorptionsfähigkeit des Gels
- › Sehr hohe Gelstabilität erleichtert die Applikation und das Anlegen des Sekundärverbands
- › Gel verläuft nicht und schützt die Wundränder

\*z. B. Comfeel® Plus Flexibel oder einen Biatain® Schaumverband



# Atrac-Tain®

## Für besonders trockene und brüchige Haut

Atrac-Tain® ist eine Feuchtigkeitscreme zum Schutz vor Austrocknung und Hautrissen bei pflegebedürftiger Haut. Die Creme hat einen 10 % Urea- und 4 % Laktatanteil und ist mit ihren Eigenschaften optimal auf die Hautsi-

tuation des Diabetischen Fußsyndroms abgestimmt. Atrac-Tain® eignet sich in Kombination mit Wundversorgungsprodukten von Coloplast ebenso zur Pflege und zum Schutz der wundumgebenden Haut.

### Indikation

Atrac-Tain wird in Kombination mit Wundversorgungsprodukten zur Pflege, zum Schutz von wundumgebener Haut und zur Prophylaxe trockener Haut angewendet, insbesondere bei

- › Füßen
- › Unterschenkeln
- › Ellenbogen
- › Händen

### Produktnutzen

- › Spendet trockener und brüchiger Haut Feuchtigkeit (zur Prophylaxe geeignet)
- › Frei von Duft- und Konservierungsstoffen, besonders für sensible Haut geeignet
- › Ureaanteil hydratisiert die Haut und erhöht die Elastizität
- › Laktat wirkt einer Verhornung entgegen
- › Ammoniumionen sorgen für den Erhalt des Säureschutzmantels der Haut

## Biatain® Silicone, mit Silikonhafrand



Artikel-Nr.	Größe/cm Schaumkissen/cm	St./VE	PZN
3434	7,5 × 7,5 4,5 × 4,5	10	3813407
3435	10 × 10 6,5 × 6,5	10	3813666
3400	10 × 20 5,5 × 15,5	5	4494921
3401	10 × 30 5,5 × 25,5	5	4494938
3408 Multishape	14 × 19,5 7,5 × 12,1	5	4494973
3436	12,5 × 12,5 8,5 × 8,5	10	4249535
3437	15 × 15 10,5 × 10,5	5	3813672
3438	17,5 × 17,5 13 × 13	5	4249541

## Biatain®, selbst haftend



Artikel-Nr.	Größe/cm Schaumkissen/cm	St./VE	PZN
3462	7,5 × 7,5 ø 4 cm	10	3462497
3420	12,5 × 12,5 8 × 8	10	2315481
3423	18 × 18 13 × 13	5	2315498

## Biatain®, Sakrum/Ferse selbst haftend



Artikel-Nr.	Größe/cm Schaumkissen/cm	St./VE	PZN
3483 Sakrum	17 × 17 8 × 9	5	2620994
3485 Sakrum	23 × 23 10 × 11	5	2399940
3488 Ferse	19 × 20 6 × 6	5	2579501

## Biatain® Silicone, mit Silikonhafrand, Sakrum/Ferse



Artikel-Nr.	Größe/cm Schaumkissen/cm	St./VE	PZN
3404 Sakrum	15 × 19 10,9 × 14	5	4494944
3405 Sakrum	25 × 25 17 × 17,2	5	4494950
3406 Ferse	18 × 18 14 × 13,2	5	4494967

## Biatain®, nicht haftend



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
6105	5 × 7	10	3731678
3410	10 × 10	10	2315469
3412	10 × 20	5	3731661
3413	15 × 15	5	2315475
3416	20 × 20	5	2344241

## Biatain® Silicone Lite, mit Silikonhafrand



Artikel-Nr.	Größe/cm Schaumkissen/cm	St./VE	PZN
3452	5 × 5 2,2 × 2,2	5	4371526
3453	5 × 12,5 2,2 × 9,7	5	4371532
3444	7,5 × 7,5 4,5 × 4,5	10	3954266
3445	10 × 10 6,5 × 6,5	10	3954272
3446	12,5 × 12,5 8,5 × 8,5	10	3954289

## Biatain® Silicone Non-Border, mit Silikonhaftung



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
9020	5 × 7,5	10	5290497
9021	7,5 × 7,5	10	5290505
9022	10 × 10	10	5290511
9023	12,5 × 12,5	10	5290528
9024	10 × 20	5	5290534
9025	15 × 15	5	5290540
9026	20 × 20	5	5290557

## SCHAUMVERBÄNDE MIT SILBER

### Biatain® Silicone Ag, mit Silikonhafrand



Artikel-Nr.	Größe/cm Schaumkissen/cm	St./VE	PZN
9636	7,5 × 7,5 4,5 × 4,5	5	4309421
9637	10 × 10 6,5 × 6,5	5	4309438
9638	12,5 × 12,5 8,5 × 8,5	5	4309444
9639	15 × 15 10,5 × 10,5	5	4309450
9640	17,5 × 17,5 13 × 13	5	4309467

### Biatain® Ag, selbst-haftend



Artikel-Nr.	Größe/cm Schaumkissen/cm	St./VE	PZN
9631	7,5 × 7,5 ø 4 cm	5	3813399
9632	12,5 × 12,5 8 × 8	5	3731690
9635	18 × 18 13 × 13	5	3731709

### Biatain® Ag, nicht-haftend



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
5105	5 × 7	5	3731655
9622	10 × 10	5	3731715
9623	10 × 20	5	3731744
9625	15 × 15	5	3731773
9626	20 × 20	5	3731767

## SCHAUMVERBÄNDE MIT IBUPROFEN

### Biatain® Ibu, sanft-haftend



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
4140	10 × 10	5	3150131
4142	10 × 20	5	3150148

### Biatain® Ibu, nicht-haftend



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
4105	5 × 7	5	3731649
4110	10 × 10	5	3151805
4112	10 × 20	5	3150102
4115	15 × 15	5	3150119
4120	20 × 20	5	3150125

## HYDROKOLLOIDVERBÄNDE

### Comfeel® Plus Flexibel



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
3110	10 × 10	10	1715149
3115	15 × 15	5	1714799
3120	20 × 20	5	1715155

### Comfeel® Plus Transparent



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
3530	5 × 7	10	1442958
3533	10 × 10	10	2835720
3548	5 × 25	5	1721380
3536	9 × 14	10	1442964
3539	15 × 15	5	2835737
3542	15 × 20	5	1442970
3547	5 × 15	5	2060199
3537	9 × 25	5	2835714

### Comfeel® Plus Contouriert



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
3280	6 × 8	5	1710933
3283	9 × 11	5	1721339

## SUPERABSORBER

### Biatin® Super, selbst-haftend



Artikel-Nr.	Größe/cm Schaumkissen/cm	St./VE	PZN
4610	10 × 10 5 × 5	10	4051017
4625	12 × 20 6 × 14	10	4051052
4615	15 × 15 8 × 8	10	4051046
4620	20 × 20 11 × 11	10	4051081

## ALGINATVERBÄNDE OHNE / MIT SILBER

### Biatin® Alginate



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
3705	5 × 5	30	4050911
3710	10 × 10	10	4050928
3715	15 × 15	10	4050934
3740	3 × 44	5	4050986

### Biatin® Alginate Ag



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
3755	5 × 5	30	4050940
3760	10 × 10	10	4050957
3765	15 × 15	10	4050963
3780	3 × 44	10	4050992

## TEXTILSTOFF ZUR HAUTFALTENVERSORGUNG

### InterDry®, mit Silberkomplex



Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	PZN
67918 Rolle	25 × 366	1	5339625

## HYDROGEL UND HAUTSCHUTZ

### Purilon® Gel



Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	PZN
3906	8 g	10	2315647
3900	15 g	10	2060176
3903	25 g	10	2060182

### Schutzcreme



Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	PZN
4720	Tube à 60 ml	6	1232474

### Atrac-Tain®, Feuchtigkeitscreme



Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	PZN
4738	Tube à 75 ml	12	2610346

### ReinigungsLOTION



Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	PZN
4710	Fl. à 180 ml	6	2062525
4715	Tücher	30	1232497

# Lokale Therapie in der Wundversorgung

**Infizierte Wunde**  Mäßig – Stark 

WUNDBILD	BEHANDLUNGSZIEL	REINIGUNG	PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE 0 – 2 cm
	<p><b>Exsudatmanagement</b> Optimal feuchtes Wundmilieu</p> <p>+</p> <p><b>Keimabtötung</b> Lokale Antiseptika, antimikrobielle Therapie</p>	<p><b>Biatain® Alginate Ag</b></p>  <p>+</p> <p><b>Sekundärverband in Abhängigkeit der Exsudatmenge</b></p>	<p><b>Biatain® Silicone Ag</b> <b>Biatain® Ag nicht-/selbst-haftend</b></p>  <p>+</p> <p><b>Biatain® Alginate Ag</b> <b>Biatain® Silicone oder Biatain® nicht-/selbst-haftend</b></p> 
			PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE > 2 cm
			<p><b>Biatain® Alginate Ag</b> <b>Biatain® Silicone oder Biatain® nicht-/selbst-haftend</b></p> 


**Nicht-infizierte Wunde**  Mäßig – Stark 

WUNDBILD	BEHANDLUNGSZIEL	REINIGUNG	PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE 0 – 2 cm
	<p><b>Exsudatmanagement</b> Optimal feuchtes Wundmilieu</p> <p>+</p> <p><b>Keimreduktion</b> Keimbindende und reduzierende Therapie, Wundspüllösung</p> <p>+</p> <p><b>Gewebeaufbau</b> Wundruhe</p>	<p><b>Biatain® Alginate</b></p>  <p>+</p> <p><b>Sekundärverband in Abhängigkeit der Exsudatmenge</b></p>	<p><b>Biatain® Silicone oder Biatain® Silicone Non-Border</b> <b>Biatain® nicht-/selbst-haftend</b></p>  <p>+</p> <p><b>Biatain® Alginate</b></p>  <p>+</p> <p><b>Biatain® Silicone oder Biatain® Silicone Non-Border</b> <b>Biatain® nicht-/selbst-haftend</b></p> 
			PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE > 2 cm
			<p><b>Biatain® Silicone oder Biatain® Silicone Non-Border</b> <b>Biatain® nicht-/selbst-haftend</b></p> 

**Nicht-infizierte Wunde/Akutwunde** Leicht 

WUNDBILD	BEHANDLUNGSZIEL	REINIGUNG	PRODUKTEMPFEHLUNG
	<p><b>Exsudatmanagement</b> Optimal feuchtes Wundmilieu</p> <p>+</p> <p><b>Epithelisierung</b> Wundruhe/Gewebeschutz</p>	<p><b>Purilon® Gel</b></p> 	<p><b>Biatain® Silicone Lite</b> <b>Comfeel® Plus</b> <b>Comfeel® Plus Transparent</b></p> 

\* Sekundärverband in Abhängigkeit der Exsudatmenge erforderlich

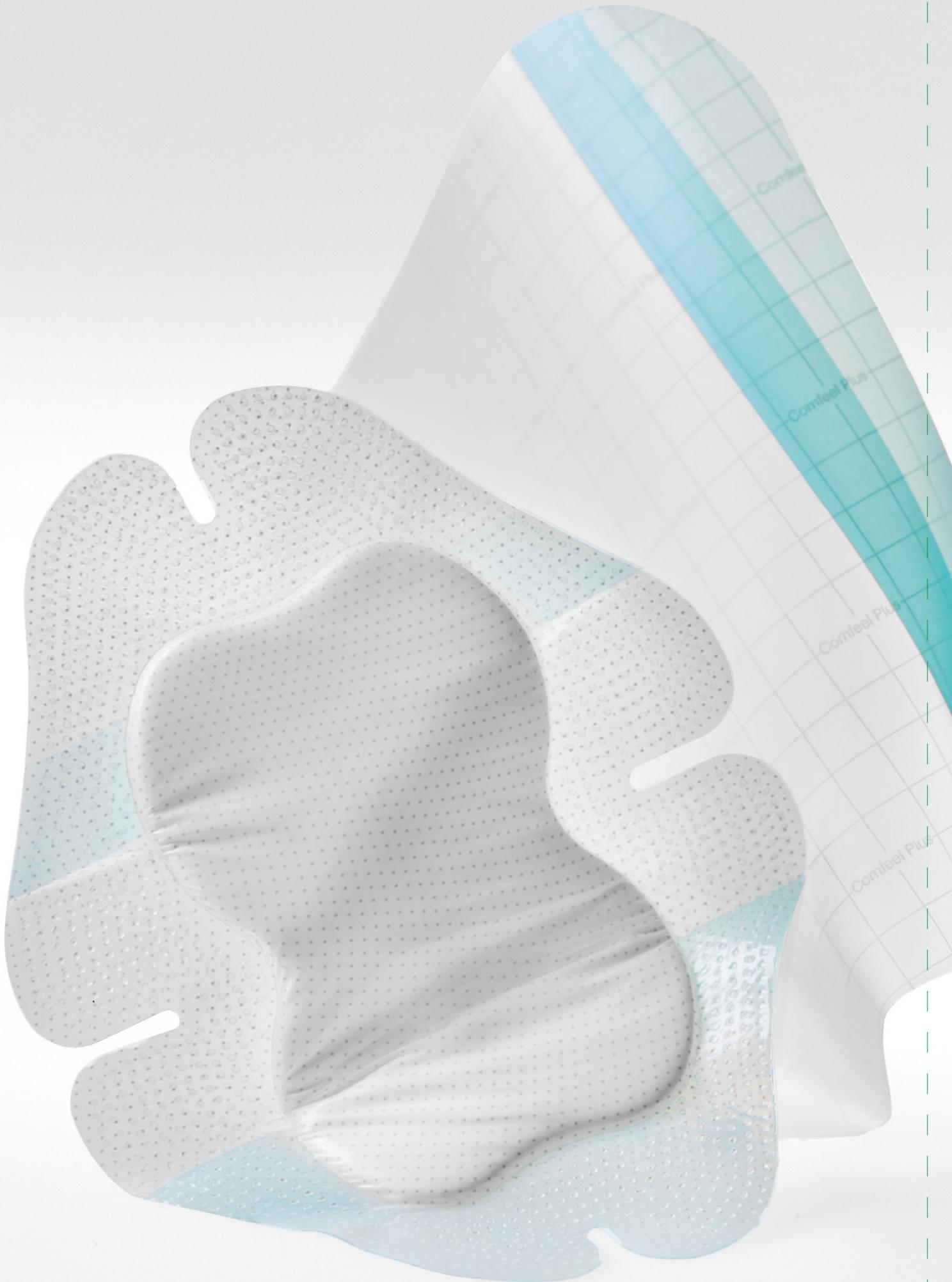



## Mehr Wissen für Sie

### *Klinische Expertise für Ärzte*

Auf unserer Evidenz-Seite haben wir für Sie unabhängige wissenschaftliche Daten aufbereitet. Hier finden Sie Informationen zu klinischen Studien, Fallberichten und auch zu grundlegenden Laboruntersuchungen.

Ausgewählte Daten stehen zum Download für Sie bereit. Bei Fragen helfen Ihnen unsere Experten gern weiter.

[www.coloplast.at](http://www.coloplast.at)

› Wundversorgung › Evidenz

Coloplast entwickelt Produkte und Serviceleistungen, die das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Fachkräften und Anwendern finden wir gemeinsam neue Wege für eine bessere Versorgung.

Wir vertreiben hochwertige Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und die Urologie. Darüber hinaus bieten wir in Deutschland auch Homecare-Dienstleistungen an. Wir sind ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 12.000 Mitarbeitern.